





Untersuchungsstühle

Gynäkologische Untersuchungsstühle AGA-LIFT

Die gynäkologischen Untersuchungsstühle AGA-LIFT sind in zwei Varianten verfügbar, mit

- elektromotorischer Beckenhochlagerung, elektromotorischer Höhenverstellung und elektromotorischer Rückenteilverstellung (Bestell-Nr. GL-1060/EEE).
- elektromotorischer Beckenhochlagerung und elektromotorischer Höhenverstellung. Die Rückenteilverstellung erfolgt manuell per Gasdruckfeder (Bestell-Nr. GL-1060/EE).



1 GL-1060/EEE, BKG-600, FUS-2000



2 GL-1060/EE, BKG-600, BHG-600, RL-2060

	AGA-LIFT	
Bestellnummer	GL-1060/EEE	GL-1060/EE
Abbildung(en)	in 1	in 2
Preis (EUR)		
Länge (mm) Rücken-/Sitzteil	1150 800/350	
Breite (mm)	580 (640 mit OP-Schienen)	
Höhenverstellung (mm)	650-850 (Elektromotor)	
Polsterstärke Sitz (mm)	85	
Polsterstärke Rücken (mm)	85-135	
Rückenteilverstellung	0° / +54° (Elektromotor)	0° / +54° (Gasdruckfeder)
Beckenhochlagerung (mm)	+30° (Elektromotor)	
Trendelenburg	30°	
Belastbarkeit (kg)	200	
Beckenausschnitt	✓	
Bodenausgleichsschrauben	✓	
Zubehör	Seiten 80-83	

- Die ergonomischen Polsterungen der Rückenlehne und Sitzfläche sorgen für einen sehr hohen Sitzkomfort. Das Sitzpolster ist mit einem Beckenausschnitt versehen. Im Rückenteil ist durch die Integration eines Schaumstoffkeils der Einsatz einer zusätzlichen Nackenrolle überflüssig.
- Die elektromotorischen Verstellungen der Beckenhochlagerung, der Sitzhöhe und gegebenenfalls des Rückenteils erfolgen über wartungsfreie und äußerst geräuscharme Antriebe, die über Fußschalter, mittels Luftimpulse, gesteuert werden.
- Anschlusswerte je Motor:
Höhe: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N.
Becken: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N.
Rücken: 230V, 50/60Hz, 1,5A, 350W, IPX4, v= 6 mm/s, 4000N.

Weitere Eigenschaften

- Die Arbeitshöhe, bei Vollnutzung beider motorischen Verstellwege, ist von einer Ausgangshöhe von 650 mm bis hinauf zu 1160 mm (gemessen an der Sitzvorderkante) stufenlos zu variieren.

Beim AGA-LIFT-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang:

- ein Paar OP-Schienen seitlich am Sitzteil,
- zwei Aufnahmen (rechte/linke Seite) für einen Kolposkophalter,
- eine Schukosteckdose an der Säulenseite,
- eine Edelstahlschale (300x200x65 mm) mit Halter,
- ein Papierrollenhalter am Rückenteil und
- die Fußschalter.

Untersuchungstühle

Gynäkologische Untersuchungstühle AGA-MED und AGA-PERMO

Der Unterschied des Untersuchungstuhls AGA-MED (Bestell-Nr. GU-1058/E) zum AGA-LIFT (Bestell-Nr. GL-1060/EE) besteht darin, dass der AGA-MED keine Höhenverstellung hat. Diese ist auch nicht nachrüstbar. Dafür ist er mit einem wegklappbaren Fußauftritt ausgestattet.

Der gynäkologische Untersuchungstuhl AGA-PERMO (Bestell-Nr. GU-1062/G) ist unabhängig von einer Energiequelle bedienbar. Sämtliche Verstelleinrichtungen sind manuell zu betätigen. Durch diese Art der Konstruktion ergibt sich auch ein äußerst niedriger Preis.

	AGA-MED	AGA-PERMO
Bestellnummer	GU-1058/E	GU-1062/G
Abbildung(en)	in 1	in 2
Preis (EUR)		
Länge (mm)	1150	
Rücken-/Sitzteil	800/350	
Breite (mm)	580 (640 mit OP-Schienen)	
Höhe (mm)	865	830
Polsterstärke Sitz (mm)	85	67
Polsterstärke Rücken (mm)	85-135	67
Rückenteilverstellung	0° / +54° (Gasdruckfeder)	0° / +63° (Gasdruckfeder)
Beckenhochlagerung	+30° (Elektromotor)	+35° (Gasdruckfeder)
Belastbarkeit (kg)	200	150
Beckenausschnitt	✓	
Bodenausgleichsschrauben	✓	
Fußauftritt (wegklappbar)	✓	
Zubehör	Seiten 80-83	



1 GU-1058/E, BKO-2522, BH-2511, RL-2060

Weitere Eigenschaften

- Die Verstellung der Beckenhochlagerung beim AGA-MED von 865 bis auf 1175 mm (gemessen an der Sitzvorderkante) erfolgt über einen wartungsfreien und geräuscharmen Elektroantrieb, der über einen Fußschalter, mittels Luftimpuls, gesteuert wird.
Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N.

Beim AGA-MED-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang:

- ein Paar OP-Schienen seitlich am Sitzteil,
- ein wegklappbarer Fußauftritt (490x320x250 mm, BxTxH),
- zwei Aufnahmen (rechte/linke Seite) für einen Kolposkophalter,
- eine Schukosteckdose an der Säulenrückseite,
- eine Edelstahlschale (300x200x65 mm) mit Halter,
- ein Papierrollenhalter am Rückenteil und
- der Fußschalter.

Beim AGA-PERMO-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang:

- ein Paar OP-Schienen seitlich am Sitzteil,
- ein wegklappbarer Fußauftritt (490x320x250 mm, BxTxH),
- zwei Aufnahmen (rechte/linke Seite) für einen Kolposkophalter,
- eine Nackenrolle mit Gurtband,
- eine Edelstahlschale (300x200x65 mm) mit Halter und
- ein Papierrollenhalter am Rückenteil.



2 GU-1062/G, RL-2060, BKO-2522, BH-2511

Untersuchungsstühle

Proktologischer Untersuchungsstuhl AGA-PROKTO-LIFT

Der proktologische Untersuchungsstuhl AGA-PROKTO-LIFT (Bestell-Nr. PRE-1067/EE) wurde entwickelt, um die Patienten vor, während und nach der Untersuchung in der Steinschnittlage so weit wie möglich psychisch zu entlasten.

Nachdem der behandelnde Arzt das Rückenteil elektromotorisch in die waagerechte Position gefahren hat, kann das komplette Sitzteil mit zwei Handgriffen nach unten abgeklappt werden.



1 PRE-1067/EE, BKG-600, FES-2000



2 PRE-1067/EE, BKG-600, FES-2000

	AGA-PROKTO-LIFT
Bestellnummer	PRE-1067/EE
Abbildung(en)	in 1-2
Preis (EUR)	
Länge Rückenteil (mm) Länge Sitzteil (mm)	1050 350
Breite (mm)	580 (1030 mit Armauflagen)
Höhenverstellung (mm) - waagrechtes Rückenteil	830-1030 (Elektromotor)
Einstiegs-/Aufsitzhöhe (mm)	620
Polsterstärke Sitz (mm)	70
Polsterstärke Rücken (mm)	95-135
Rückenteilverstellung	0° / +54° (Elektromotor)
Sitzteil	manuell abklappbar
Belastbarkeit (kg)	130
Beckenausschnitt	✓
Bodenausgleichsschrauben	✓
Paar Befestigungskloben	BKG-600
Paar Fersenstützen	FES-2000
Paar Beinhalter nach Göpel	BHG-600
Zentralverstellung (Ø 50 mm)	LR/Z-50

- Die Ansteuerungen der Höhen- und Rückenteilverstellungen erfolgen über wartungsfreie, spritzwassergeschützte und geräuscharme Elektromotoren, die mittels Fußschalter pneumatisch betrieben werden.
Anschlusswerte je Motor: Höhenverstellung: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N. Rückenteilverstellung: 230V, 50/60Hz, 1,8A, 360W, IPX4, v=7 mm/s, 10000N.
- Die weite Auslage des Sockels, in Verbindung mit dem herausziehbaren Stützfuß, garantiert eine hohe Standsicherheit.
- Die stoß- und kratzfesten Abdeckhauben der Säule und des Sockels lassen sich leicht hygienisch sauber halten.

Beim AGA-PROKTO-LIFT-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang:

- ein Paar Armlehnen,
- eine Edelstahlschale (250x190x45 mm) mit Halter,
- ein Papierrollenhalter am Rückenteil,
- die Sicherheitsstütze und
- die Fußschalter.

Weitere Eigenschaften

- Die ergonomischen Polsterungen sorgen für einen sehr hohen Liegekomfort. Im Rückenteil ist durch die Integration eines Schaumstoffkeils der Einsatz einer zusätzlichen Nackenrolle überflüssig.

Untersuchungsstühle

Proktologische Untersuchungsstühle AGA-RE-PRO-LIFT und AGA-RE-PRO

Proktologische Untersuchungen können in den so genannten Knieellenbogen- oder in Steinschnittlagen durchgeführt werden. Die Untersuchungsstühle AGA-RE-PRO-LIFT (Bestell-Nr. RPL-1060/EE) und AGA-RE-PRO (Bestell-Nr. RP-1058/E) sind für die Untersuchungsposition in der Knieellenbogenlage ausgestattet.

Der AGA-RE-PRO (Bestell-Nr. RP-1058/E) hat keine Höhenverstellung. Da der Abstand zwischen der Knieauflagenplatte und der höhenverstellbaren Rektorolle veränderlich ist, kann der Arzt die Höhe der Rektorolle individuell jedem Patienten anpassen. Für den Patienten ergibt sich dadurch eine sichere Untersuchungsposition und für den Arzt wird eine ergonomisch gute und angenehme Arbeitshöhe erreicht.

	AGA-RE-PRO-LIFT	AGA-RE-PRO
Bestellnummer	RPL-1060/EE	RP-1058/E
Abbildung(en)	in 1	in 2
Preis (EUR)		
Länge (mm)	1150	
Rücken-/Sitzteil	800/350	
Breite (mm)	580 (640 mit OP-Schienen)	
Höhenverstellung (mm)	650-850 (Elektromotor)	—
Feste Höhe (mm)	—	865
Polsterstärke Sitz (mm)	85	
Polsterstärke Rücken (mm)	85-135	
Rückenteilverstellung	0° / +54° (Gasdruckfeder)	
Beckenhochlagerung	+30° (Elektromotor)	
Trendelenburg	30°	30°
Belastbarkeit (kg)	200	
Beckenausschnitt	✓	
Bodenausgleichsschrauben	✓	
Fußauftritt (wegklappbar)	•	✓
Zubehör	Seiten 80-83	

✓ gehört zum Lieferumfang • lieferbar (gegen Aufpreis) — nicht lieferbar



1 RPL-1060/EE, BKO-2522, RRH-65



2 RP-1058/E, BKO-2522, RRH-65, RL-2060

Weitere Eigenschaften

Die Eigenschaften vom AGA-RE-PRO-LIFT sind fast identisch mit denen vom AGA-RE-PRO.

- Durch die Vollnutzung beider motorischer Verstellwege (Höhe und Sitzteil) kann beim AGA-RE-PRO-LIFT eine Arbeitshöhe von 650 mm bis zu 1160 mm (gemessen an der Sitzteilvervorderkante) stufenlos eingestellt werden. Während beim AGA-RE-PRO durch das elektromotorische Anstellen des Sitzteils eine Arbeitshöhe vom 865 mm bis 1175 mm (ebenfalls gemessen an der Sitzteilvervorderkante) erreicht werden kann.
- Die Verstellungen erfolgen über wartungsfreie, ruhig laufende und gegen Spritzwasser geschützte Elektroantriebe, die über Fußschalter, mittels Luftimpulse, gesteuert werden. Anschlusswerte je Motor: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N.
- Um das Aufsteigen des Patienten auf die Knieplatte zu erleichtern, ist der AGA-RE-PRO mit einem wegklappbaren Fußauftritt ausgestattet. Der Abstand zwischen dem Fußauftritt und der Knieauflagenplatte (in der niedrigsten Stellung) beträgt 400 mm.

Zum Komplettpreis der proktologischen Untersuchungsstühle gehören:

- ein paar OP-Schienen seitlich am Sitzteil,
- zwei Aufnahmen (rechte/linke Seite) für einen Kolposkophalter,
- eine Schukosteckdose an der Säulenrückseite,
- eine Edelstahlschale (300x200x65 mm) mit Halter,
- ein Papierrollenhalter am Rückenteil und
- der/die Fußschalter.

Beim Modell AGA-RE-PRO (Bestell-Nr. RP-1058/E) werden zusätzlich noch:

- ein wegklappbarer Fußauftritt (490x320x250 mm, BxTxH) und
- eine Knieauflagenplatte mitgeliefert.

Untersuchungsstühle

Urologische Untersuchungsstühle AGA-URO-LIFT

Zu den urologischen Untersuchungsstühlen AGA-URO-LIFT (Bestell-Nr. UUS-3060/EEE und UUS-3060/EE) und AGA-URO-MED (Bestell-Nr. UUS-3058/E, nächste Seite) gehören eine synchron zum Sitzteil mitgeführte Kreiselspüle.

Dadurch wird der Spritzschutz, auch in der obersten Beckenhochlagerungsposition, erhöht. Die Kreiselspüle ist mit einem Sifon, einem Sprühkopf sowie mit Zu- und Abflussschläuchen ausgestattet. Die technischen Daten bzw. Anschlusswerte entnehmen Sie bitte der nächsten Seite.



1 UUS-3060/EE, BKG-600, BH-2511, RL-2060



2 UUS-3060/EE, BKG-600, BH-2511, RL-2060

	AGA-URO-LIFT	
Bestellnummer	UUS-3060/EEE	UUS-3060/EE
Abbildung(en)	ähnlt. 1-2	in 1-2
Preis (EUR)		
Länge (mm) Rücken-/Sitzteil	1150 800/350	
Breite (mm)	580 (640 mit OP-Schienen)	
Höhenverstellung (mm)	650-850 (Elektromotor)	
Polsterstärke Sitz (mm)	85	
Polsterstärke Rücken (mm)	85-135	
Rückenteilverstellung	0° / +54° (Elektromotor)	0° / +54° (Gasdruckfeder)
Beckenhochlagerung	+30° (Elektromotor)	
Trendelenburg	30°	
Belastbarkeit (kg)	200	
Beckenausschnitt	✓	
Bodenausgleichsschrauben	✓	
Zubehör	Seiten 80-83	

Rückenteil ist durch die Integration eines Schaumstoffkeils der Einsatz einer zusätzlichen Nackenrolle überflüssig.

- Die elektromotorischen Verstellungen der Höhe, der Beckenhochlagerung und gegebenenfalls der Rückenlehne erfolgen über wartungsfreie und äußerst geräuscharme Antriebe, die über Fußschalter, mittels Luftimpulse, gesteuert werden.
- Anschlusswerte je Motor:
 Höhe: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N.
 Becken: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N.
 Rücken: 230V, 50/60Hz, 1,5A, 350W, IPX4, v= 6 mm/s, 4000N.

Beim AGA-URO-LIFT-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang:

- ein Paar OP-Schienen seitlich am Sitzteil,
- zwei Aufnahmen (rechte/linke Seite) für einen Kolposkophalter,
- eine Schukosteckdose an der Säulenrückseite,
- eine parallel mitgeführte Kreiselspüle (gemäß DIN EN 1717),
- ein Papierrollenhalter am Rückenteil und
- die Fußschalter.

Weitere Eigenschaften

- Die Arbeitshöhe, bei Vollnutzung beider motorischen Verstellwege, ist von einer Ausgangshöhe von 650 mm bis hinauf zu 1160 mm (gemessen an der Sitzvorderkante) stufenlos zu variieren und bietet so für jeden Anwender eine optimale Arbeitshöhe.
- Die ergonomischen Polsterungen der Rückenlehne und Sitzfläche sorgen für einen sehr hohen Sitzkomfort. Das Sitzpolster ist mit einem Beckenausschnitt versehen. Im

Urologischer Untersuchungstuhl AGA-URO-MED

Der Unterschied des Untersuchungstuhls AGA-URO-MED (Bestell-Nr. UUS-3058/E) zum AGA-URO-LIFT (Bestell-Nr. UUS-3060/EE) besteht darin, dass der AGA-URO-MED keine Höhenverstellung hat. Diese ist auch nicht nachrüstbar. Dafür ist er mit einem wegklappbaren Fußauftritt ausgestattet.

	AGA-URO-MED
Bestellnummer	UUS-3058/E
Abbildung(en)	in 1-2
Preis (EUR)	
Länge (mm) Rücken-/Sitzteil	1150 800/350
Breite (mm)	580 (640 mit OP-Schienen)
Höhe (mm)	865
Polsterstärke Sitz (mm)	85
Polsterstärke Rücken (mm)	85-135
Rückenteilverstellung	0° / +54° (Gasdruckfeder)
Beckenhochlagerung	+30° (Elektromotor)
Belastbarkeit (kg)	200
Beckenausschnitt	✓
Bodenausgleichsschrauben	✓
Fußauftritt (wegklappbar)	✓
Zubehör	Seiten 80-83

Weitere Eigenschaften

- Die Verstellung der Beckenhochlagerung von 865 bis auf 1175 mm (gemessen an der Sitzvorderkante) erfolgt über einen wartungsfreien und äußerst geräuscharmen Elektroantrieb, der über einen Fußschalter, mittels Luftimpuls, gesteuert wird.
Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz, 3,7A, 850W, IPX4, v=14 mm/s, 7000N.

Beim AGA-URO-MED-Komplettpreis gehören zum Lieferumfang:

- ein Paar OP-Schienen seitlich am Sitzteil,
- ein wegklappbarer Fußauftritt (490x320x250 mm, BxTxH),
- zwei Aufnahmen (rechte/linke Seite) für einen Kolposkophalter,
- eine Schukosteckdose an der Säulenrückseite,
- eine parallel mitgeführte Kreislaspüle (gemäß DIN EN 1717),
- ein Papierrollenhalter am Rückenteil und
- der Fußschalter.



1 UUS-3058/E, BKG-600, BH-2511, RL-2060



2 UUS-3058/E, BKG-600, BH-2511, RL-2060 - Detail

Technische Daten - Kreislaspüle

- Edelstahlschale 330x300x100 mm (BxTxH),
- Zulauf: Schlauch Ø 3/8", Länge 1500 mm,
- Verchromtes Universalventil 1 1/4"xØ 60 mm (inklusive Stopfen), mit Flaschensifon 1 1/4"xØ 32 mm,
- Ablauf: Spiralschlauch, Ø 32 mm (Innen), Länge 1600 mm.

Zubehör

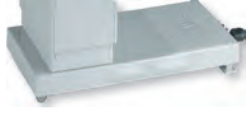
Zubehör für Untersuchungsstühle

Foto	Bestellnummer	Artikelbeschreibung	Preis (EUR)
	BKO-2522	Paar Befestigungskloben, starr, Chrom, passend für OP-Schiene.	
	BKG-600	Paar Befestigungskloben nach Göpel, verstellbar, Chrom, passend für OP-Schiene.	
	HRM-14/Band HRM-14/Klett	Halbrundrolle mit Gurtband. Halbrundrolle mit Klettverschluss. Ø 200x400 mm, aus Kunstleder. Polsterfarben auf Seite 4.	
	RL-2060	Paar Ringarmlehnen, schwarz, Abmessungen 270x340x45 mm (HxLxB), mit Klemmgriff (M10).	
	BH-2511	Paar Beinhalter mit Kunststoffschalen. *Paar Befestigungskloben für OP-Schienen erforderlich.	
	BHG-600	Paar Beinhalter nach Göpel, PU-geschäumte Auflagen, schwarz, mit Kugelgelenken. *Paar Befestigungskloben für OP-Schienen erforderlich.	
	GBH-2000	Paar Göpelbeinhalter, Chrom, PU-geschäumte Auflagen, schwarz, mit Kugelgelenken, zweifach gebogene Stangen, mit Kunstlederbezug, Polsterfarben auf Seite 4. *Passend nur mit Befestigungskloben nach Göpel (BKG-600).	
	FUS-2000	Paar Fußstützen, Chrom, mit Kunstlederbezug, verstellbare Trittschalen. Polsterfarben auf Seite 4. *Passend nur mit Befestigungskloben nach Göpel (BKG-600).	

Gynäkologie	Gynäkologie	Gynäkologie	Urologie	Proktologie	Proktologie
					
GL-1060/EE(E)	GU-1058/E	GU-1062/G	UUS-3060/EE(E) UUS-3058/E	RPL-1060/EE RP-1058/E	PRE-1067/EE
▪	▪	▪	▪	▪	—
▪	▪	▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪	▪	—
▪	▪	▪	▪	▪	—
▪	▪	▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪	▪	—
▪	▪	▪	▪	▪	—

✓ gehört zum Lieferumfang ▪ lieferbar (gegen Aufpreis) — nicht lieferbar

Zubehör für Untersuchungsstühle

Foto	Bestellnummer	Artikelbeschreibung	Preis (EUR)
	FES-2000	Paar Fersenstützen, Chrom. *Passend nur mit Befestigungskloben nach Göpel (BKG-600).	
	RRH-65	Rektorolle, stufenlos höhenverstellbar, Abmessungen 740x65x550 mm (LxBxH). *Paar Befestigungskloben für OP-Schienen erforderlich.	
	BP-430 BP-460	Beinplatte, Abmessungen 350x580 mm (LxB). Beinplatte, Abmessungen 350x580 mm (LxB). Zur Verlängerung der Liegefläche vom Untersuchungsstuhl. Polsterfarben auf Seite 4.	
	KP-1058	Knieplatte, Abmessungen 170x520 mm (LxB). Polsterfarben auf Seite 4. *Gehört beim RP-1058/E zum Lieferumfang.	
	KS-2000	Kreiselspüle (gemäß DIN EN 1717), Edelstahlschale 330x300x100 mm (BxTxH), Zulauf Schlauch Ø 3/8", Länge 1500 mm, verchromtes Universalventil 1 1/4"xØ 60 mm (inklusive Stopfen), mit Flaschensifon 1 1/4"xØ 32 mm, Ablauf Spiralschlauch, Ø 32 mm (Innen), Länge 1600 mm. *Nicht nachrüstbar.	
	ERV	Aufpreis für elektromotorische Rückenteilverstellung statt Gasdruckfeder, Ansteuerung per Fußschalter (oder Handschalter). Anschlusswerte des Motors: 230V, 50/60Hz, 1,5A, 350W, IPX4, v=10 mm/s, 3500N. Gehört beim GL-1060/EEE und beim UUS-3060/EEE zum Lieferumfang. *Nicht nachrüstbar.	
	KH-300/L	Kolposkophalter, für Systeme Leisegang und Kaps. *Gestellfarbe (auf S. 4) bei der Auftragserteilung bitten angeben.	
	KH-300/Z	Kolposkophalter, für Systeme Zeiss und Olympus. *Gestellfarbe (auf S. 4) bei der Auftragserteilung bitten angeben.	
	LR/Z-50	Zentralverstellbare Fahreinrichtung mit Laufrollen (Ø 50 mm). Der Sockel ist mit zwei Bockrollen (am Fußende) und zwei Lenkrollen (am Kopfende) versehen. Der schwarze Feststellhebel, der mit dem Fuß bedient wird, befindet sich am Kopfende des Sockels. *Nicht nachrüstbar.	

Gynäkologie	Gynäkologie	Gynäkologie	Urologie	Proktologie	Proktologie
					
GL-1060/EEE GL-1060/EE	GU-1058/E	GU-1062/G	UUS-3060/EEE UUS-3060/EE UUS-3058/E	RPL-1060/EE RP-1058/E	PRE-1067/EE
▪	▪	▪	▪	▪	▪
▪	▪	▪	▪	▪	—
— ▪	— ▪	▪ —	— ▪	— ▪	— —
▪	▪	▪	▪	▪	—
▪	▪	—	✓	▪	—
✓ ▪	▪	▪	✓ ▪ ▪	▪	✓
▪	▪	▪	▪	▪	—
▪	▪	▪	▪	▪	—
▪	▪	▪	▪	▪	▪

✓ gehört zum Lieferumfang ▪ lieferbar (gegen Aufpreis) — nicht lieferbar